


# 鶏病検査マニュアル、鶏のサルモネラ検査方法、修正

① p24 図1

誤：TSB(1,000ml) 正：TSB(100ml)

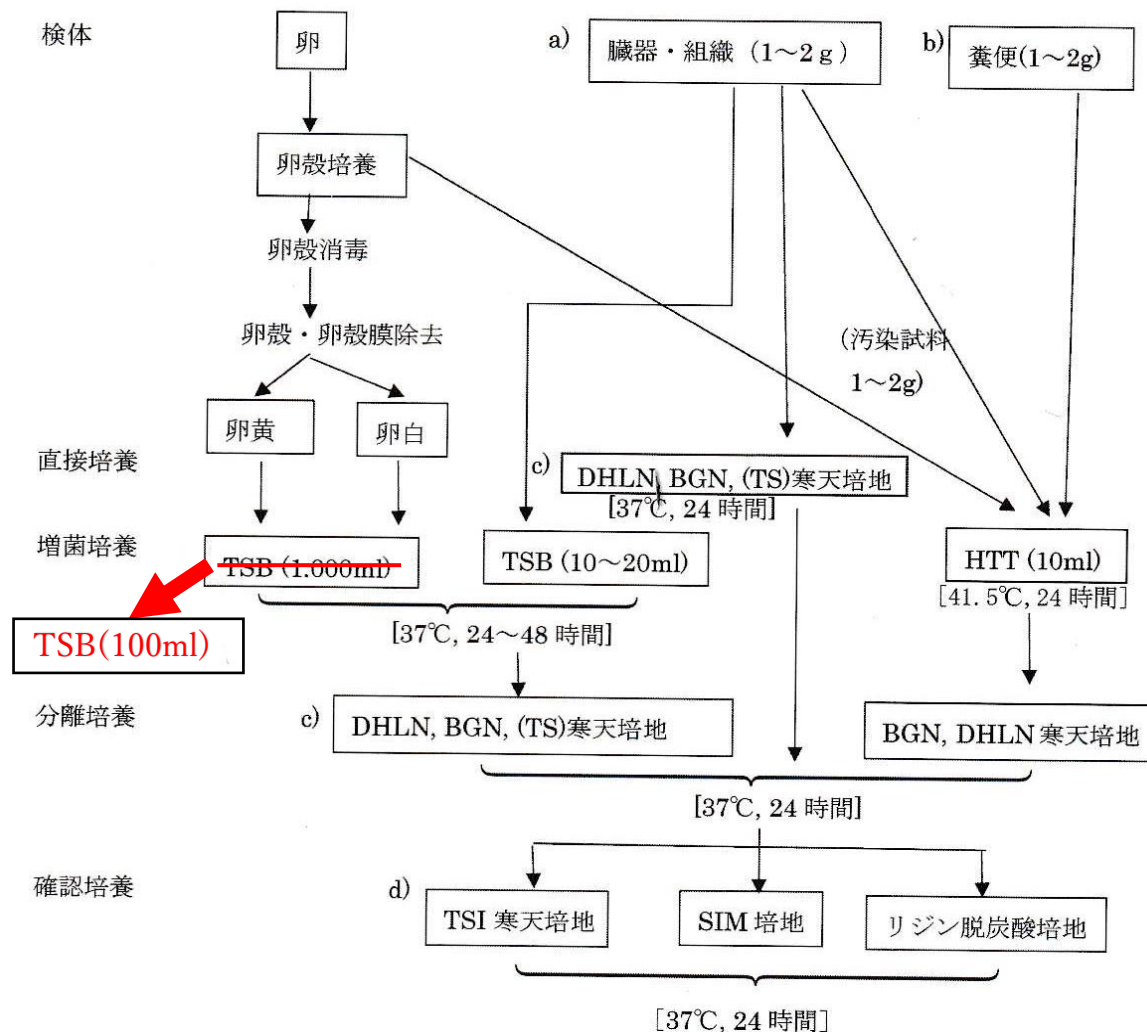

- 注 a) 臓器・組織：心臓（心尖部），心膜，肝臓，胆嚢（胆汁を含む），腹膜（綿棒拭い試料），腎臓，脾臓，卵巣（異常卵胞を含む），精巣，卵管（上部1/3および滲出液等），遺残卵黄
- b) 糞便：小腸（メッケル憩室を中心として前後2~3cm）および盲腸内容
- c) TS寒天培地は，ひな白痢（*S. Pullorum*感染症）の疑われた場合に併用。[注：3）参照]
- d) 血清学的検査：確認培養によりサルモネラの性状を示した菌株は，TSI寒天培地の斜面上の菌についてサルモネラO多価およびO1多価血清による“のせガラス凝集反応”を行う。[注：4）参照]

図 1. 感染が疑われる鶏の臓器・組織等からのサルモネラ分離培養法

② p26 左欄、2) 血清型別：6行目

誤：主要な6血清型 正：主要な5血清型

③ p26 左欄、2) 血清型別：9行目

誤：マルチプレクスPCR(m-PCR) 正：マルチプレクスPCR(m-PCR)